


# Alimentación

ALIMENTACIÓN POR SONDA

## Sonda nasogástrica (NG)

- UNA SONDA NASOGÁSTRICA ES UN TUBO DE ALIMENTACIÓN QUE SE INTRODUCE AL COSTADO DE UNA DE LAS NARINAS (ORIFICIOS DE LA NARIZ). LA SONDA BAJA HASTA EL ESTÓMAGO DEL BEBÉ.
  - A VECES, PUEDE INSERTARSE LA SONDA DE ALIMENTACIÓN EN LA BOCA, ESPECIALMENTE CUANDO EL BEBÉ RECIBE APOYO RESPIRATORIO, POR EJEMPLO, CON UN CPAP DE BURBUJA.
- LA SONDA SE SUJETA CON UNA PEQUEÑA PORCIÓN DE CINTA ESPECIAL.
- SE UTILIZARÁ LA SONDA CUANDO EL BEBÉ NO PUEDA SER ALIMENTADO COMO NECESITA POR BOCA.
- CADA SONDA DE ALIMENTACIÓN PUEDE PERMANECER INSERTADA DURANTE 7 DÍAS.

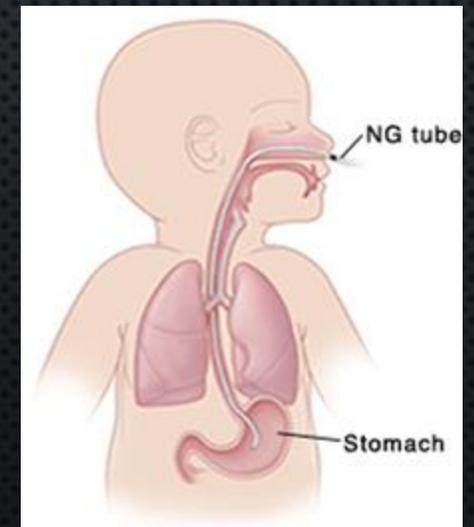

## Sonda de alimentación nasogástrica (NG)

- ES IMPORTANTE CONTROLAR LA POSICIÓN DE LA SONDA DE ALIMENTACIÓN DEL BEBÉ ANTES DE USARLA.
  - UNA BUENA COLOCACIÓN SIGNIFICA QUE LA COMIDA INGRESARÁ EN EL ESTÓMAGO DEL BEBÉ Y NO EN SUS PULMONES.
  - PARA CONTROLAR LA COLOCACIÓN DE LA SONDA DE ALIMENTACIÓN: MIRE EL NÚMERO QUE ESTÁ JUSTO AFUERA DE LAS NARINAS Y CONFIRME CON EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE ES EL NÚMERO ADECUADO PARA LA EDAD Y EL TAMAÑO DEL BEBÉ.

## Cómo verificar la leche

- ES IMPORTANTE QUE, ANTES DE CADA ALIMENTACIÓN, SE VERIFIQUE QUE EL NOMBRE EN LA JERINGUILLA O LA BOLSA DE LECHE SEA EL NOMBRE DE SU BEBÉ.
- PUEDE HACERLO REVISANDO LA ETIQUETA QUE ESTÁ EN LA JERINGUILLA O LA BOLSA.
  - AVISE AL PERSONAL DE ENFERMERÍA SI LA ETIQUETA NO COINCIDE CON EL APELLIDO DE SU BEBÉ.

# Cómo calentar la leche del bebé

- LÁVESE LAS MANOS O LÍMPIELAS CON GEL.
- USE UNA BOLSA PENGUIN THERMA-LINER NUEVA PARA CADA TURNO DE 12 HORAS.
- ABRA LA SECCIÓN FRONTAL CON EL CIERRE AZUL Y LLÉNELA CON AGUA COMÚN HASTA LA LÍNEA DE PUNTOS.
- CIERRE EL CIERRE.
- COLOQUE LA BOLSA THERMA-LINER EN EL CALENTADOR PENGUIN.
- DESPUÉS DE VERIFICAR EL NOMBRE EN LA JERINGUILLA, COLOQUE LA JERINGUILLA O EL FRASCO DE LECHE EN LA SECCIÓN SUPERIOR NARANJA DE LA BOLSA THERMA-LINER.



## Cómo calentar la leche del bebé

- PRESIONE EL BOTÓN "CALENTAR/APAGAR" [WARM/OFF] QUE ESTÁ MÁS A LA IZQUIERDA, UNA VEZ.
- LA MÁQUINA ARRANCARÁ AUTOMÁTICAMENTE PARA VOLÚMENES DE <10 ML DE LECHE.
- PRESIONE EL BOTÓN "SELECCIÓN" [SELECTION] QUE SE ENCUENTRA MÁS A LA DERECHA UNA VEZ PARA 10 A 19 ML, DOS VECES PARA 20 A 29 ML, TRES VECES PARA 30 A 39 ML, ETCÉTERA.
- LA LUZ ROJA DE "PRECAUCIÓN" [WARNING] SE ENCENDERÁ Y LA MÁQUINA EMPEZARÁ A FUNCIONAR.
- LA LUZ VERDE DE "LISTO" [READY] SE ILUMINARÁ CUANDO LA LECHE SE HAYA CALENTADO.
- PRESIONE EL BOTÓN "CALENTAR/APAGAR" [WARM/OFF] QUE SE ENCUENTRA MÁS A LA IZQUIERDA PARA APAGAR EL CALENTADOR.

## Cómo usar la bomba para jeringuillas Medela

- EN ESTE ENLACE, PODRÁ VER UN VIDEO BREVE SOBRE LA BOMBA PARA JERINGUILLAS MEDELA: HAGA CLIC CON EL BOTÓN DERECHO EN EL ENLACE QUE SIGUE Y SELECCIONE «ABRIR HIPERVÍNCULO».
- [HTTPS://WWW.MEDELABREASTFEEDINGUS.COM/VIDEO-PAGE/112/ENTERAL-FEEDING-PUMP-IN-SERVICE](https://www.medelabreastfeedingus.com/video-page/112/enteral-feeding-pump-in-service)



## Bomba para jeringuillas Medela

- LÁVESE LAS MANOS O LÍMPIELAS CON GEL.
- APRIETE LA PALANCA NEGRA HACIA LA LENGÜETA BLANCA PARA SOLTAR EL AGARRE.
- MIENTRAS APRIETA LA LENGÜETA NEGRA, DESLICE LA GUÍA DE LA JERINGUILLA COMPLETAMENTE HACIA LA DERECHA.
- SUELTE LA PALANCA DE SUJECIÓN.
- LEVANTE LA ABRAZADERA TRANSPARENTE DE LA JERINGUILLA QUE ESTÁ EN EL CENTRO.
- INSERTE LA JERINGUILLA CON EL TUBO ADJUNTO Y BAJE LA ABRAZADERA TRANSPARENTE DE LA JERINGUILLA CERCIORÁNDOSE DE QUE LA LENGÜETA DE LA JERINGUILLA ESTÉ BIEN SUJETA EN LA LENGÜETA METÁLICA.
- APRIETE LA PALANCA DE SUJECIÓN NEGRA Y DESLICE LA GUÍA DE LA JERINGUILLA HACIA LA IZQUIERDA HASTA QUE TOQUE EL ÉMBOLO DE LA JERINGUILLA.

# Bomba para jeringuillas Medela

- PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO.
- PRESIONE #1 (VOL/TIEMPO).
- PRESIONE ENTER/SÍ.
- LA JERINGUILLA ESTÁ CARGADA.
- PRESIONE ENTER/SÍ NUEVAMENTE.
- SE DETECTA EL TAMAÑO DE LA JERINGUILLA.

## Cómo ingresar el volumen que se entregará.

- A CONTINUACIÓN, INGRESARÁ UN VOLUMEN DE LECHE:
  - PRESIONE 2 Y 0 PARA 20 ML DE LECHE.
  - PRESIONE 3 Y 0 PARA 30 ML DE LECHE, ETCÉTERA.

# Cómo ingresar el tiempo de alimentación

- PRESIONE ENTER/SÍ NUEVAMENTE.
- A CONTINUACIÓN, PROGRAMARÁ EL TIEMPO
  - PRESIONE 3 Y 0 PARA 30 MINUTOS.
  - PRESIONE 6 Y 0 PARA 60 MINUTOS.
  - PRESIONE 1 Y 30 PARA UNA ALIMENTACIÓN DE 90 MINUTOS.

- PRESIONE ENTER/SÍ NUEVAMENTE.
- PRESIONE ENTREGAR.
- CONECTE EL TUBO DE LA JERINGUILLA CON LA SONDA DE ALIMENTACIÓN DEL BEBÉ.
- PRESIONE ENTER/SÍ NUEVAMENTE.
- TITILARÁ UNA LUZ **VERDE**.
  - ASÍ SABRÁ QUE LA ALIMENTACIÓN ESTÁ EN CURSO.
  - SI TITILA UNA LUZ ROJA, LA ALIMENTACIÓN NO COMENZÓ.

EN ----- ENCENDIDO ----- CONECTAR ----- VERDE